


INSTRUCCIONES DE AJUSTE

- 1 No hay necesidad de hervir o realizar un ajuste personalizado con este protector bucal Lithos Pro. Colóquese el protector bucal y ajústelo con cuidado sobre el aparato dental y asegúrese de que se alinee con el canal ortodóntico. El protector bucal se ajustará de manera segura y cómoda cuando se coloque de manera adecuada.

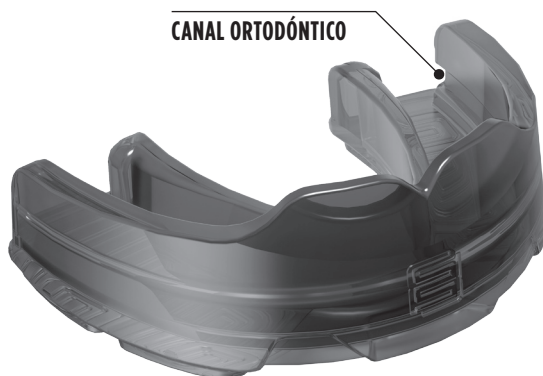

- 2 Tenga cuidado al quitar el protector bucal para no desprender el aparato dental.
- 3 Este protector bucal Lithos Pro no requiere ningún 'acabado', es decir que no se debe recortar para lograr el ajuste y la comodidad.

No tire este folleto, ya que contiene información que es importante para el usuario.

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de leer y comprender totalmente las siguientes precauciones de seguridad y la guía del usuario antes de utilizar este protector bucal.

Este protector bucal se puede utilizar con aparatos dentales; consulte con un dentista u ortodoncista que ponga aparatos dentales u otros dispositivos sobre la conveniencia de este protector bucal. Este protector no se puede utilizar a menos que lo apruebe la persona que pone el aparato dental.

NO muerda el protector bucal.

Si el protector bucal se muerde o si no se utiliza según lo previsto, su efectividad en términos de ajuste, protección y durabilidad se reducirá en gran medida. Siga atentamente las instrucciones de ajuste en la otra página. El usuario previsto de este protector bucal Lithos Pro debe asegurarse de añadir su nombre a la etiqueta ubicada dentro de la caja del protector bucal y en el área provista debajo de la Guía del usuario del protector bucal.

Este protector bucal no lo debe utilizar ninguna otra persona que no sea la que aparece en la Guía del usuario y en la Caja del protector bucal.

Para los usuarios cuya mandíbula sigue en crecimiento, que tienen exfoliación de dentición primaria y erupción de dentición secundaria, un tutor responsable debe revisar el ajuste del protector bucal regularmente. Si el protector bucal está suelto o muy ajustado a los dientes o las encías, se debe reemplazar.

GUÍA DEL USUARIO DEL PROTECTOR BUCAL

- **Este protector bucal se puede utilizar con aparatos dentales; consulte con un dentista u ortodoncista que ponga aparatos dentales u otros dispositivos sobre la conveniencia de este protector bucal. Este protector no se puede utilizar a menos que lo apruebe la persona que pone el aparato dental.**
- Este paquete contiene información importante y se debe conservar para futuras consultas.
- Este Lithos Pro (protector bucal listo) ha aprobado las pruebas de impacto de DD 253: 2001 y ha alcanzado el Nivel de rendimiento 2 de SATRA para personas que practican actividades deportivas y recreativas de menor contacto como béisbol, baloncesto, críquet, fútbol, hockey, lacrosse, artes marciales, rugby y otros deportes de contacto.
- Hay dos niveles de rendimiento de impacto que se asignan a los protectores bucales DD 253: 2001 aprobados, a saber, 1 y 2, donde el Nivel 1 ofrece el menor nivel de protección y el Nivel 2 ofrece la mayor protección.
- Al elegir un protector bucal, escoja uno del tamaño y tipo adecuado según la información de edad proporcionada por el fabricante. Asegúrese de que el protector bucal elegido sea del tipo y nivel de rendimiento correcto con respecto a la actividad deportiva o recreativa para la que lo utilizará. Se incluye una lista de todas las actividades deportivas para las cuales este protector bucal es adecuado.
- Para obtener detalles completos del ajuste, consulte las Instrucciones de ajuste en la otra página.
- Para aquellas personas cuya mandíbula sigue en crecimiento, el ajuste del protector bucal se debe revisar regularmente. Se deberá reemplazar el protector bucal si ya no se ajusta correctamente.
- Consulte antes a su cirujano dentista u ortodoncista si pretende utilizar este protector bucal como protector de noche.
- Este protector bucal está hecho con una goma de silicona de grado medicinal.
- La caja incluida proporciona un almacenamiento seguro y limpio para su protector bucal. El protector bucal debe conservarse en la caja cuando no se utilice. Utilice agua potable (que no supere los 35 °C/95 °F) para lavar el protector bucal y la caja después de cada uso. Seque minuciosamente antes de guardar.
- Este protector bucal Lithos Pro es para uso exclusivo de _____ Desde la siguiente fecha / /
- Según la regularidad e intensidad de uso, Makura Sport recomienda que reemplace su protector bucal cada 2 años; sin embargo, debe revisarlo visualmente después de cada uso. Si la superficie de mordida está desgastada, rajada o partida, debe reemplazar el protector bucal de inmediato.
- Si el protector bucal provoca sensibilidad o reacción alérgica, o si siente incomodidad después de utilizarlo, busque atención médica de inmediato.
- Este protector bucal listo ha sido probado y certificado por SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way Industrial Estate, Kettering, Northamptonshire NN 16 8SD, Reino Unido (Número de referencia notificado 0321).

Este protector bucal no contiene látex. No se ha registrado que los materiales utilizados provoquen reacciones alérgicas o sensibilidad.